


Состав комплекта препарата


В комплект препарата входят: предварительно заполненный шприц с препаратом, 2 иглы для в/м инъекций (в дельтовидную и ягодичную мышцы) — длинная игла с серым корпусом и короткая игла с голубым корпусом.

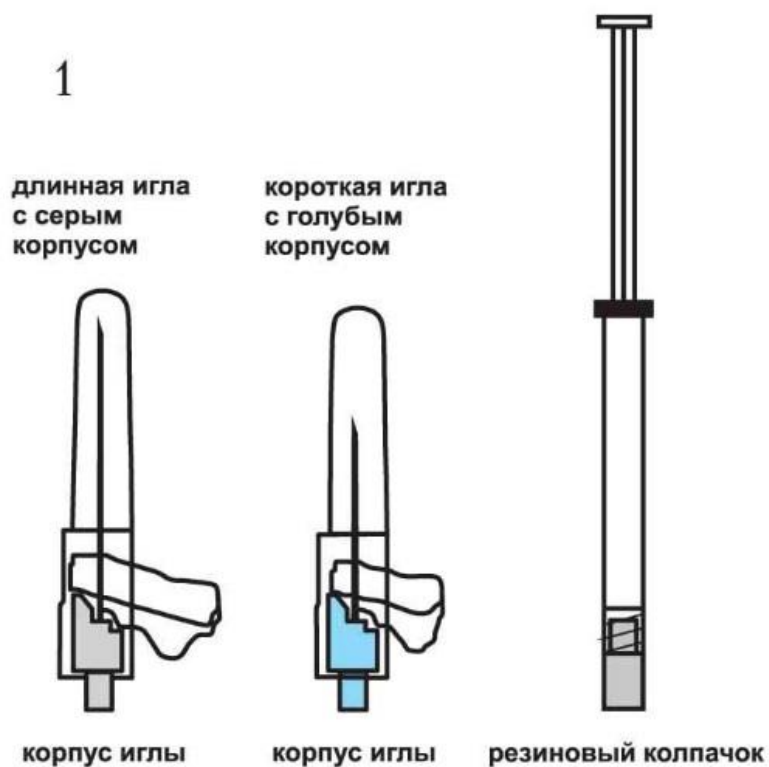

Указания по применению комплекта препарата

Шприц предназначен только для однократного введения.

1. Интенсивно встряхнуть шприц в течение 10 с для получения однородной суспензии.

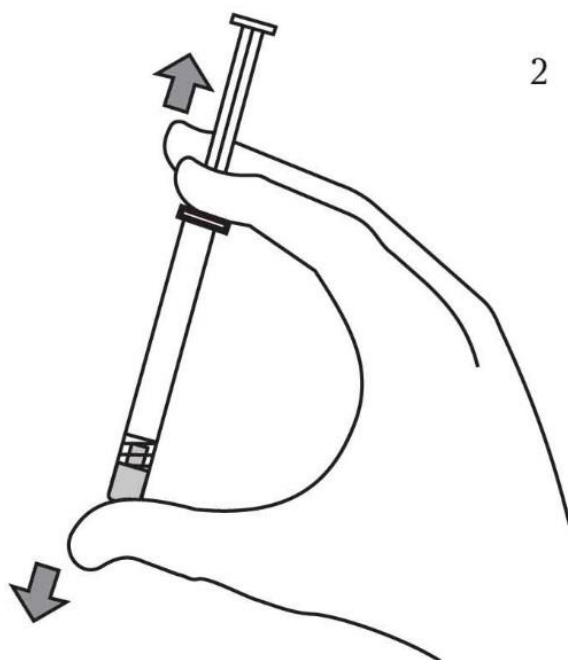


2. Выбрать соответствующую иглу.


Для введения в дельтовидную мышцу больным массой тела <90 кг использовать короткую иглу (с голубым корпусом), а больным массой тела ≥90 кг — длинную иглу (с серым корпусом).

Для введения в ягодичную мышцу использовать длинную иглу (с серым корпусом).

3. Держа шприц вертикально, снять с него резиновый колпачок путем аккуратного вращения по часовой стрелке.

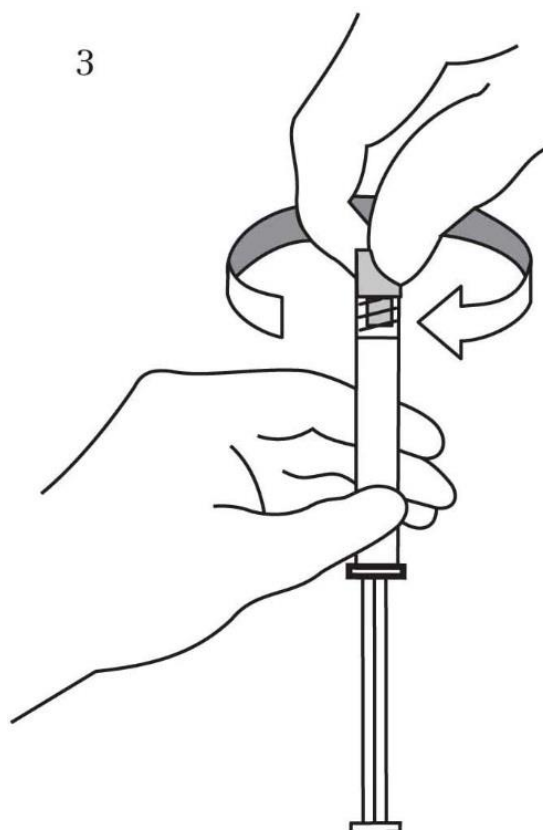


4. Наполовину открыть упаковку безопасной иглы, взяться за колпачок иглы через упаковку и вставить шприц в люэровский колпачок иглы путем аккуратного вращения по часовой стрелке.

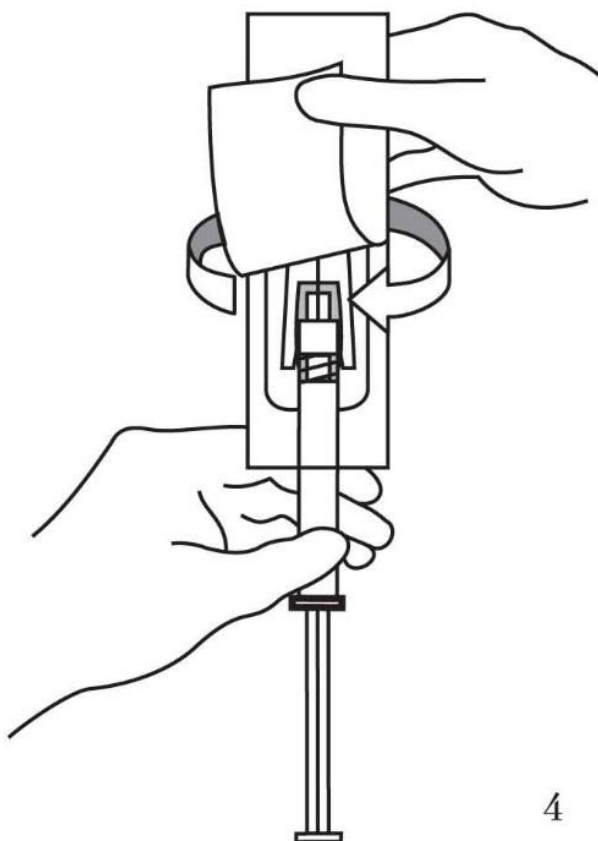


4

5. Снять с иглы колпачок, потянув его вдоль иглы. Не следует вращать колпачок, т.к. это может ослабить соединение иглы со шприцем.

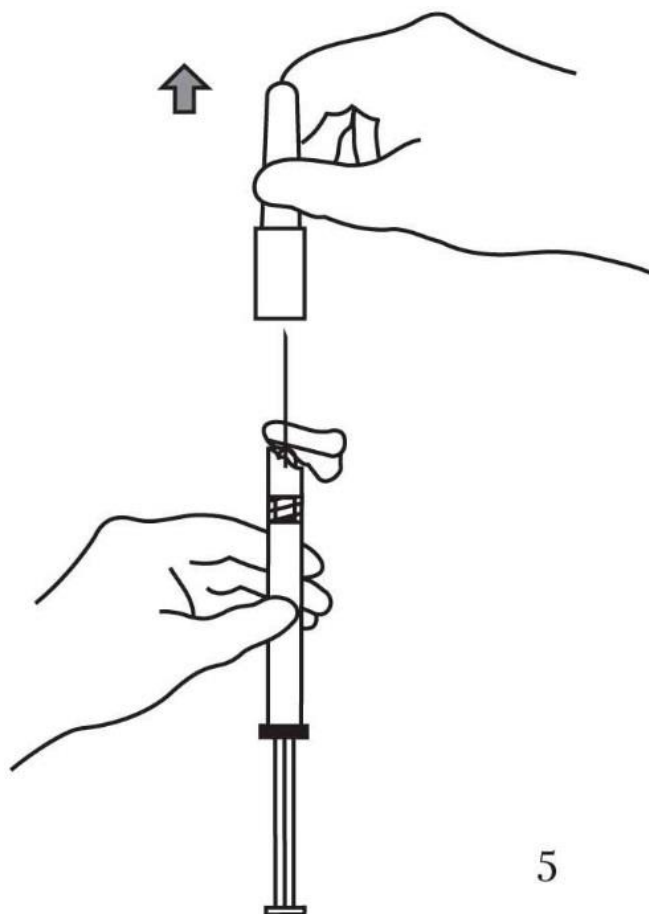

6. Направить шприц иглой вверх и выдавить из шприца воздух, слегка надавив на поршень.

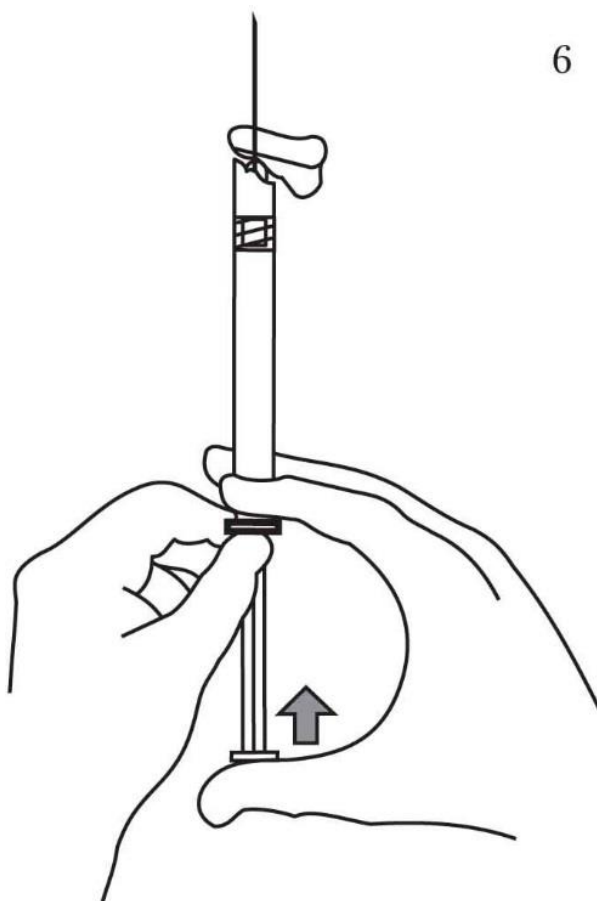

7. Ввести все содержимое шприца в выбранную мышцу (дельтовидную или ягодичную). Не вводить препарат в кровеносный сосуд или подкожно.

8. После завершения инъекции привести защиту иглы в рабочее положение большим (см. рис. 7) или указательным (см. рис. 8) пальцем или надавив шприцем о твердую поверхность (см. рис. 9). Защита иглы должна зафиксироваться со щелчком. Шприц с иглой уничтожить так, как это полагается.

